




SIGVARIS
GROUP

ASSORTIMENT
FLEBOLOGIE

LIVE YOUR LIFE. BE YOURSELF.

Dit motto is onze leidraad. Het is gericht op de gebruikers van onze compressieoplossingen. Zij zijn onze focus. Individuen met uiteenlopende medische en persoonlijke behoeften. Mensen die maar één ding willen: een actief leven leiden en daarbij trouw blijven aan hun stijl. Zonder compromissen. Daarom hebben wij onze merkstructuur en productportfolio herzien. Op het eerste gezicht lijken veel dingen nieuw. Wat echter belangrijk is: de producten blijven onveranderd.

Op de volgende pagina's kunt u lezen hoe de nieuwe productstructuur eruit ziet en waarom wij ervan overtuigd zijn dat deze verandering ook voor u veel voordelen zal hebben.

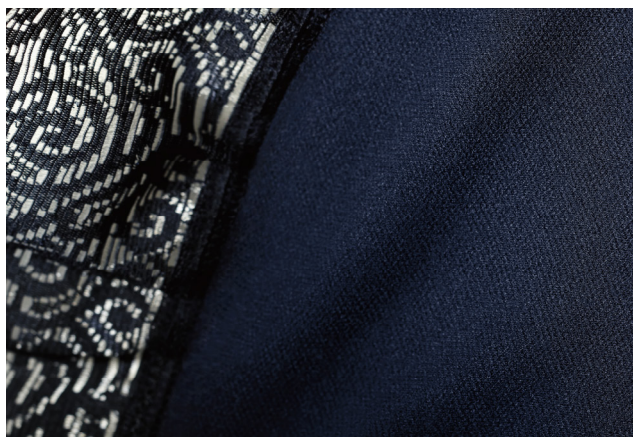

INHOUDSOPGAVE

Over SIGVARIS GROUP	2
Waarom SIGVARIS GROUP	3
Onze klantengroepen	4
Diensten en labels	5
Kleuren	6
Siliconenboorden	7

sigvaris	8
Essential	11
COMFORTABLE	13
THERMOREGULATING	15
Style	17
SEMITRANSSPARENT	19
Active	21
MASCULINE	23
Specialities	25
TRADITIONAL	27
ULCER X	29
DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN	31
THROMBO	33
ARM KOUSEN ADVANCE & TRADITIONAL	35
Accessoires AAN- EN UITTREKHULPEN	37
VERZORGING EN AANVULLENDE PRODUCTEN	36



Informatie	38
Correct maatnemen	38
Tips and tricks	39
Speciale modellen/speciale verzoeken	40
Compressieklassen, indicaties en contraindicaties	42
Maattabellen vanaf pag	44

OVER SIGVARIS GROUP

Wij willen de beste compressiehulpmiddelen voor mensen ontwikkelen. Elk individu moet zich goed voelen. Elke dag. Daar richten wij ons al meer dan 150 jaar op.

Onze portfolio bestaat uit verschillende segmenten die inspelen op verschillende behoeften en indicaties. Elk segment is zo ontworpen dat u niet alleen een geschikte, maar ook de beste compressieoplossing voor uw klant kunt vinden. Enerzijds ligt de nadruk op het effect en de medische aspecten - anderzijds moeten de producten de klant een goed gevoel geven en helpen om hun leven te leiden zonder beperkingen.

Kwaliteit „made in Switzerland“ is belangrijk voor ons. Daarom zijn we erg trots op onze productiefaciliteit in St. Gallen.

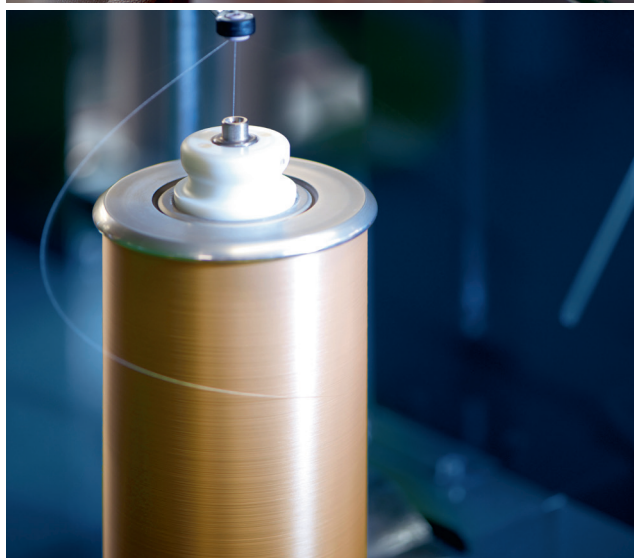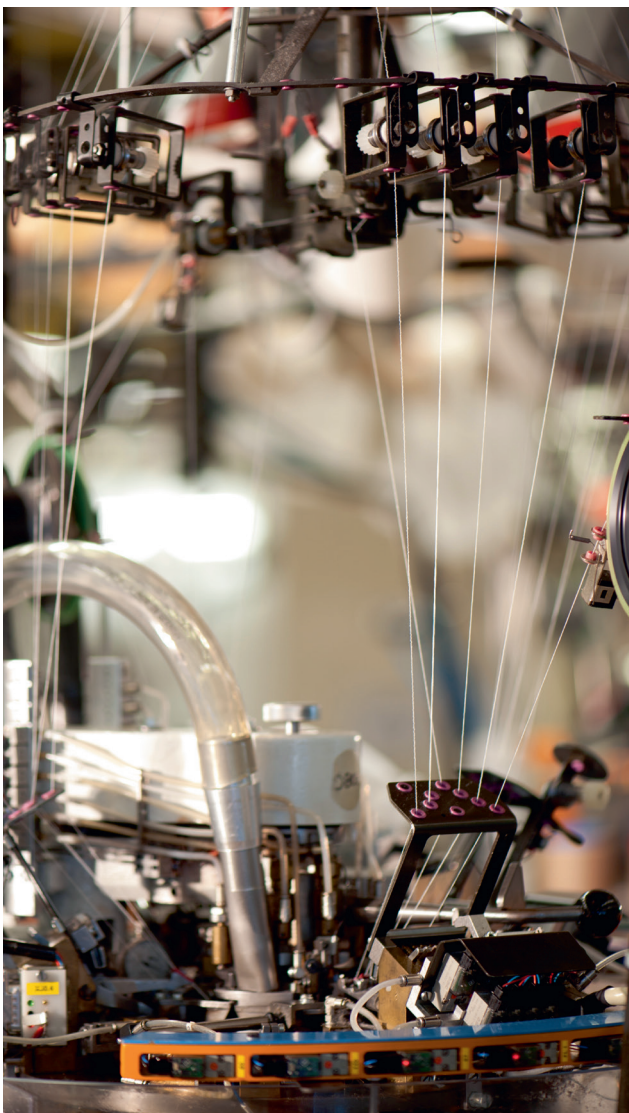

WAAROM SIGVARIS GROUP

Onze compressieproducten passen in elke levensstijl, omdat wij ons op mensen richten. Dit is altijd onze benadering geweest, en dit wordt nu ook weerspiegeld in ons productassortiment. Wij begrijpen dat mensen gewoon zichzelf willen zijn. Ongeacht waar en wanneer.

U kent uw klanten. En uw klanten vertrouwen erop dat u hen helpt zich goed te voelen. Het nieuwe gestructureerde assortiment maakt het makkelijker om de beste oplossing te vinden. We hebben onze beproefde producten opnieuw ingedeeld in nieuwe segmenten, zodat u gemakkelijk het juiste product kunt vinden..

WIJ ZIJN TOEGEWIJD OM MENSEN TE HELPEN ZICH OP HUN BEST TE VOELEN. ELKE DAG.

ONZE SEGMENTEN

Essential

Deze oplossingen zijn ontworpen voor levenssituaties waarin klanten op zoek zijn naar iets ongecompliceerds. Comfort en betrouwbaarheid zijn de topprioriteiten. Voor dagelijkse bruikbaarheid.

Style

Het mode-aspect staat hier centraal. Style biedt gegarandeerd de juiste kous voor elke gelegenheid, of het nu gaat om het dagelijkse kantoorleven, een ontspannen brunch of een speciale gebeurtenis.

Active

Voor een levensstijl met veel lichaamsbeweging, zowel in uw vrije tijd als op het werk. Active biedt de perfecte oplossing voor actieve dagen.

Specialities

Wanneer medische aspecten overheersen en standaard compressieoplossingen niet volstaan: deze producten zijn bestemd voor zeer specifieke medische indicaties of behoeften.



ONZE KLANTENGROEPEN

Ieder mens is uniek en zijn behoeften aan compressiehulpmiddelen kunnen veranderen, afhankelijk van zijn levenssituatie. Zo kan een product uit het Essential-segment het juiste zijn voor overdag, en voor een avondje uit kan Style het product zijn dat het beste past. Of iemand kan besluiten om Active te gebruiken tijdens het dagelijkse werk, maar kiest voor Essential voor de ontspannende uurtjes thuis.

De nieuwe structuur van het assortiment is afgestemd op de behoeften van de mensen die onze producten gebruiken. In een uitgebreid marktonderzoek hebben we gebruikers ondervraagd en ons vervolgens consequent georiënteerd op de resultaten.



De Ideologen

Voor hen is het belangrijkste dat hun product ongecompliceerd en gemakkelijk is. Hun segment is Essential.



De Beauty-Queens

Voor hen zijn mode-aspecten belangrijk. Aantrekkelijke, stijlvolle kousen zijn belangrijk. Zij kunnen deze vinden in het Style-segment.




Actieve mensen

Hun dynamische levensstijl moet ook in de compressieoplossingen tot uiting komen. De producten moeten robuust zijn en actieve ondersteuning bieden, net als de producten in het Active-segment.

DIENSTEN EN LABELS

U de hoogste service en productkwaliteit bieden - dat is belangrijk voor ons. Wij staan voor compressietherapie en ondersteunen onze verkooppartners graag met onze productkennis en medische expertise.

Naast onze interne kwaliteitszorg, die onze producten nauwgezet test, verplichten ook diverse kwaliteitskeurmerken ons tot het handhaven van een hoge kwaliteit.

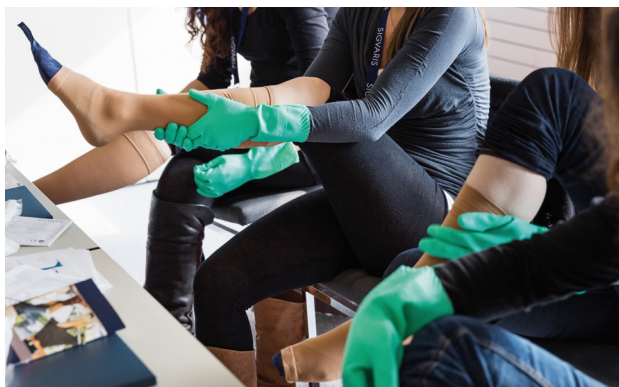

Wij zijn dagelijks bezig met onze producten en compressietherapie. Wij geven deze kennis door via opleidingen, ons buitendienstteam en de klantenservice. Wij werken voortdurend aan het optimaliseren van onze diensten zoals adviesdiensten en bestelprocessen. Het is voor ons ook belangrijk dat wij compressietherapie bij een breder publiek bekend maken en zo ook onze verkooppartners versterken.



Wij voldoen aan alle kwaliteits- en testvoorschriften van het RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (Duits instituut voor kwaliteitsborging en etikettering) voor medische compressiekousen en daarmee aan de norm DIN 58133.



Onze medische compressiekousen zijn getest op menselijke ecologie en voldoen aan de internationaal bindende Eco-Tex norm 100.



Onze medische compressiekousen voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatievoorschriften van de desbetreffende EU-regelgeving.

KLEUREN

Compressiekousen zijn tegenwoordig verkrijgbaar in een breed scala van kleuren. Naast gedurfde modekleuren zijn ook talrijke standaardkleuren - zoals verschillende huidtinten en zwart - verkrijgbaar. Vooral de kousen in het Style-segment worden gekenmerkt door een grote keuze aan kleuren. Het Style SEMITRANSSPARENT-assortiment heeft om de twee jaar vier nieuwe trendkleuren.



					
skin	caramel	savanna	grey	nature	brown
					
marine	light beige	beige	cyanide	carbon	crispa
					
black	true blue*	cool grey*	deep lavender*	happy yellow*	

* leverbaar vanaf 01.03.2021

SILICONENBOORDEN

Afhankelijk van het product kunnen de gebruikers van compressiekousen kiezen uit verschillende siliconenboorden. Alle siliconenboorden overtuigen door hun huidvriendelijkheid en hoog draagcomfort.

Essential COMFORTABLE /
THERMOREGULATING



Sensinova siliconenband SVGT
neutraal ontwerp; onzichtbaar



Quadrinova siliconen noppenband KGT
neutraal ontwerp; prettig op de huid

Style SEMITRANSSPARENT



Sensinova siliconenband SVGT
vrouwelijk ontwerp; onzichtbaar



Quadrinova siliconen noppenband KGT
vrouwelijk ontwerp; prettig op de huid

Specialities TRADITIONAL



Siliconen noppenband KGT
neutraal ontwerp

sigvaris

Live your life. Be yourself.

De compressiekousen van Sigvaris beantwoorden aan de eisen van de dragers die van hun gekozen product meer verwachten dan louter functionaliteit en doeltreffendheid. In de segmenten Essential, Style, Active en Specialities vinden veeleisende gebruikers producten die passen bij hun specifieke behoeften en persoonlijke voorkeuren en die geschikt zijn voor elk moment van de dag. Alle producten overtuigen door individuele eigenschappen en een hoogwaardige afwerking.

Welkom in de wereld van Sigvaris.





„Ik kies Essential voor mijn
dagelijkse werkzaamheden.
Eenvoudig aan- en uittrekken en
ongecompliceerd hanteren zijn
mijn topprioriteiten.“

„Ik geef de voorkeur aan betrouwbare en
comfortabele compressieoplossingen,
wat ik ook doe. Daarom kies ik voor
Essential.“



Essential

Comfort en betrouwbaarheid zijn de topprioriteiten bij de Essential-lijn oplossingen. Ze zijn de flexibele metgezellen voor alledag, ongecompliceerd en toch visueel aantrekkelijk. Ze passen net zo goed op het vrouwenbeen als op het mannenbeen. Elk model is ontworpen voor regelmatig, ongecompliceerd en betrouwbaar gebruik in het streven naar gezondheid.

Essential COMFORTABLE p. 13

Essential THERMOREGULATING p. 15



Essential COMFORTABLE

Voor hem en haar



Essential COMFORTABLE is de compressiekous die past als een handschoen en voldoet aan de hoogste normen van comfort en verzorging. Ze is aangenaam zacht, aangenaam om dragen en past zich perfect aan het figuur aan.

COMFORTABLE		 AD		 AG Dijbeen			 AT Panty	 AT Maternity	 AT Bodyform
afkorting ECF		Softboord	Siliconen- band	Softboord	Siliconen- band	Heupstuk	Softband	Softband	Softband
CCL	1	●		●	●		●	●	
	2	●	●	●	●	●	●	●	●
Teen		●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●
Siliconen band	Sensinova siliconenband				●				
	Quadrinova siliconenband		●		●				
Kleuren	 savanna	●	●	●	●	●	●	●	●
	 black	●	●	●	●	●	●	●	●
	 caramel	●	●	●	●	●	●	●	●
	 skin	●			●		●	●	
	 grey	●			●		●	●	

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de omslag;
informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40



perfect fit

Comfortabel: perfecte pasvorm voor hem en haar



opaque

Aantrekkelijk: niet-transparent, verbergt de veneuze
probleemzones perfect



easy to use

Handig: makkelijk aan en uit te trekken





Essential THERMOREGULATING

Voor hem en haar



De fijne katoenlaag van Essential THERMOREGULATING ligt direct op de huid en heeft een thermoregulerend effect. Het katoen absorbeert overtollig vocht direct van de huid en slaat het op in de vezels. Dit voorkomt de ontwikkeling van een vochtfilm op de huid die de ongewenste groei van bacteriën bevordert. Dit is gunstig voor mensen met een gevoelige huid.

THERMOREGULATING		 AD		 AG Dijbeen			 AT Panty	 AT Maternity
		Softband ^{1,2}	Siliconen- band	Softband	Siliconen- band	Heupstuk	Softband ³	Softband
CCL	1	●		●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●
	3	●			●	●	●	
Teen		●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●
Siliconen- band	Sensinova siliconenband				● CCL 1/2			
	Quadrinova (nop) siliconenband		●		●			
Kleuren	 black	●	●	●	●		●	●
	 nature	●	●	●	●	●	●	●
	 marine	verkrijgbaar als AD met softband, CCL 2, gesloten teen, normaal en lang						

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoefte op de voorzijde binnenin de omslag;
informatie over speciale modellen/behoefte op blz. 40

¹ CCL 2 met gesloten teen is ook verkrijgbaar als maxivoet in zwart of naturel, behalve in XXS en XXS Plus

² CCL 2 met open en gesloten teen, is ook verkrijgbaar als korte lengte in zwart of naturel

³ CCL 2 en 3 met open en gesloten teen, is ook verkrijgbaar als korte lengte in natuur



sensitive skin

Zacht: is ook geschikt voor gevoelige benen dankzij het 14 % katoengehalte en de softbandafwerking



thermoregulating

Koel: verdamping van het in het katoen opgeslagen vocht, wat een verkoelend effect heeft

Warm: de lucht in de ruimte tussen het breiwerk en de vezels vormt een isolerende laag bij koude temperaturen



opaque

Aantrekkelijk: discreet, niet-transparante geribbelde structuur, verbergt veneuze probleemzones perfect





„Ik hou van mode en kleuren. Aantrekkelijke productdetails zijn ook belangrijk voor mij, of het nu op kantoor, thuis of op een feestje is. Mijn compressiekous kan ik vinden in het Style segment.“



Style

Sigvaris Style richt zich niet alleen op het medische aspect, maar ook op het mode-aspect. Hier kunnen dragers de verschillende facetten van hun persoonlijkheid tot uitdrukking brengen en hun individualiteit onderstrepen. Style biedt de juiste kous voor het dagelijkse leven, maar ook voor speciale gelegenheden. De modellen zijn ontworpen voor een elegante, zelfbewuste en aantrekkelijke uitstraling. De kousen overtuigen door geraffineerde productdetails en passen net zo goed bij avondkleding als bij zakelijke outfits.

Style SEMITRANSSPARENT p. 19



Style SEMITRANSSPARENT

Voor haar



Style SEMITRANSSPARENT fascineert door stijlvol, elegant charisma, innovatieve details en maximaal draagcomfort. Het voldoet aan de hoogste eisen van stijl en mode en overtuigt door haar semitransparante uiterlijk. De compressiekous werd speciaal voor vrouwelijke behoeften ontwikkeld. Vanaf maart 2021 verkrijgbaar met een extra zachte grip voor nog meer draagcomfort.

SEMITRANSSPARENT		 AD		 AG Dijbeen	 AT Panty	 AT Maternity
Afkorting SSE		Softband	Siliconen- band	Siliconen- band	Softband	Softband
CCL	1	●		●	●	●
	2	●	●	●	●	●
Toe		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
Siliconen band	Sensinova siliconenband			●		
	Quadrinova noppensiliconenband		●	●		
Colors	 black  caramel  savanna	●	●	●	●	●
	 skin	●		●	●	●
geen standaard voorraad, bestelling bij order	 grey  marine	●		●	●	●
	 true blue*  cool grey*					
	 deep lavender*  happy yellow*					

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de omslag;
informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

* Leverbaar vanaf 01.03.2021



semitransparant

Fijn: elegant, semitransparant uiterlijk



elegant

Stijlvol: vrouwelijke esthetiek; ook verkrijgbaar in vier trendy kleuren



perfect shaping

Aantrekkelijk: vormt been en billen optimaal





„Mijn compressiekousen moeten mijn actieve leven bij kunnen houden en mij en mijn benen ondersteunen. Daarom heb ik voor Active gekozen.“



Active

Sigvaris Active kousen zijn geschikt voor mensen die afhankelijk zijn van speciale ondersteuning in hun dynamische leven. Deze oplossingen zorgen voor een optimale ondersteuning, zelfs in actieve situaties. De producteigenschappen zorgen ervoor dat de drager zich op elk moment van de dag of het jaar zelfverzekerd en veilig voelt.

Active MASCULINE p. 23



Active MASCULINE

For hem



Active MASCULINE is de perfecte oplossing voor alle mannen die een actief leven leiden. Dankzij vochtregulerende garens en de geïntegreerde geurremmende zink finish, blijven de voeten fris, zelfs in kritieke situaties. Active MASCULINE is speciaal ontwikkeld voor mannenvoeten, wat een optimale pasvorm garandeert.

MASCULINE		 AD
Afkorting AMA		
		Softband
CCL	2	
Toe		
Colors	 black	
	 brown	
	 carbon	
	 cyanide	

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoefte op de voorzijde van de omslag; informatie over speciale modellen/behoefte op blz. 40



dempende zool

Comfortabel: met zoolvulling over het hele oppervlak



reinforced heel

Sterk: versterkte hiel voor meer bescherming in het actieve dagelijkse leven



seamless toe section

Aangenaam om te dragen: naadloze teen voor minder drukpunten





Specialities

Soms is het medische aspect van primair belang en kan niet aan de behoeften van de kousendrager worden voldaan met standaard compressieoplossingen. Dit zijn de situaties waarin producten uit het segment Specialities tot hun recht komen. Kenmerkend voor deze producten is dat elke kous voor een zeer specifieke medische indicatie of speciale behoefte is ontwikkeld.

Specialities TRADITIONAL	p. 27
Specialities ULCER X	p. 29
Specialities DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN	p. 31
Specialities THROMBO	p. 33
Specialities ARMKOUSEN ADVANCE & TRADITIONAL	p. 35



Specialities

TRADITIONAL

VOOR HEM EN HAAR

Wanneer een hoge medische doeltreffendheid vereist is, is TRADITIONAL de juiste kous. Het unieke spanning-rek-gedrag van de garensamenstelling garandeert een hoge drukstabiliteit gedurende de hele dag en een effectieve behandeling, zelfs bij gevorderde veneuze aandoeningen. TRADITIONAL is gemakkelijk aan te trekken, zelfs bij hoge compressieniveaus. Ze is robuust, duurzaam en ademend.

TRADITIONAL													
Afkorting TRA		AB ₁ Enkelsok	AD		AF halfhoog		AG Dijbeen				AT Panty- broek	AT Maternity	AT man
		Enkelsok	Softband	Siliconen- band	Softband	Siliconen- band	Softband	Siliconen- band	Heupband		Softband	Softband	Softband
CCL	2		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	3		●	●	●	●	●	●	●				
	4		●		●		●						
Teen		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
Sil band	Siliconennoppen			●		●		●					
Kleuren	 beige	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoeften op de voorzijde binnenin de omslag; informatie over speciale modellen/behoeften op blz. 40

Betrouwbaar: zeer betrouwbaar en medische doeltreffendheid voor een succesvolle therapie

Robuust: maximale drukstabiliteit gedurende de hele dag dankzij geraffineerd natuurrubber, uitstekende compressie eigenschappen en hoge stiffness

Effectief: aanbevolen door artsen wereldwijd





Specialities

ULCER X

Voor hem en haar

ULCER X is een compressiekousensysteem voor de behandeling van ulcera (ulcus cruris venosum) bestaande uit een liner (15 - 20 mmHG) en een bovenkous TRADITIONAL (ccl 2). In vergelijking met zwachtels is ULCER X gemakkelijk aan te trekken, meestal zonder hulp van buitenaf, en comfortabel om te dragen. Het compressiekousensysteem maakt een gecontroleerde, precieze compressie mogelijk.

ULCER X Afkorting ULX		 AD
		Softband
CCL	~ 45mmHG	●
Teen		● (TRADITIONAL)
		● (Liner)
Kleur	 beige	●


Volledig overzicht van compressieniveaus en indicaties/behoefte op de voorzijde van de omslag; informatie over speciale modellen/behoefte op blz. 40

Studies kennen ULCER X verschillende voordelen toe: voor meer informatie kunt u de ULCER X folder opvragen bij Proflebo

Bescherming: dankzij de gepatenteerde liner blijft het wondverband ook `s nachts op zijn plaats zitten en wordt de wond, bij correct gebruik, niet nadelig beïnvloed, bij het aan- en uittrekken van de overkous.

Effectief: betere genezing van kleine en middelgrote ulcera in vergelijking met zwachtels

ULCER X Kit bevat: 2x liner, 1x TRADITIONAL
Extra liners zijn afzonderlijk verkrijgbaar (per 4 stuks verpakt)

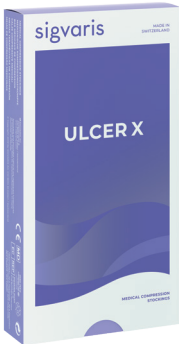



Specialities

DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN

VOOR HEM EN HAAR

DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN zijn geschikt voor mensen met diabetes met een indicatie voor compressie vanwege diabetes bij een veneus oedeem en/of symptomen van arteriële insufficiëntie . De sok speelt in op de speciale behoeften van diabetische voeten. Hij is voorzien van een lichte compressiedruk (18 - 25 mmHg) van B tot D, een compressievrij voetgedeelte, zacht breiwerk en speciale polstering op de voetzool en in de teenzone. Een naadloze teen is speciaal ontwikkeld om de tenen te beschermen.

DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN		 AD
Afkorting DCS		
		Softband
CCL	18–25 mmHG (2.2–3.3 kPa)	●
Toe		●
Colors	 white	●

indicaties/behoefte op de voorzijde aan de binnenzijde van de omslag;
informatie over speciale modellen/behoefte op blz. 40

Het wordt aanbevolen DIABETISCHE COMPRESSIESOKKEN te gebruiken na een medisch onderzoek. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij patiënten met perifere arteriële vaatlijden en perifere neuropathie. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik en over de kousen wordt verwezen naar de uitleg in de productinformatie of de bijsluiter.

Een speciale heren- en damesvariant garanderen de best mogelijke pasvorm in het voetgedeelte. De twee varianten verschillen in de grootte van het voetgedeelte.


LET OP

DEZE KOUS VALT BUITEN DE VERGOEDINGEN
EN KOMT VOOR EIGEN REKENING
VAN DE CLIËNT

Huidverzorgend: waterabsorberende en waterafstotende garenc componenten zorgen voor een goed vocht klimaat in de sok

Veilig: de witte kleur geeft een duidelijk zicht op eventuele wonden

Hygiëne: wasbaar op 95 °C in een wasnetje

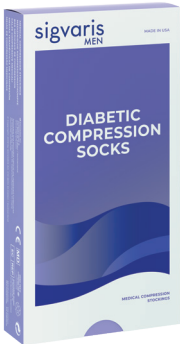



Specialities

THROMBO

Voor hem en haar

De THROMBO wordt gebruikt voor tromboseprofylaxe bij liggende patiënten. Het is geschikt na chirurgische ingrepen (vooral abdominale, onderbuik- en orthopedische chirurgie), na breuken of verwondingen aan de benen en in gevallen van beperkte mobiliteit.

THROMBO		 AD		 AG Dijbeen	
Afkorting THR		Soft band		Siliconen- band	
				Heupstuk*	
CCL	~18 mmHg (~2.4 kPa)	●	●	●	●
Teen	met inspectie- opening	●	●	●	●
Sil band	Siliconen noppen		●		

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoefte op de voorzijde binnenin de omslag; informatie over speciale modellen/behoefte op blz. 40

* Maat XS niet beschikbaar als THROMBO AG-heup

Zacht: degressieve drukcurve en compressie van ~ 18 mmHg in het gebied van de enkel

Verzorgend: huidvriendelijk en ademend

Praktisch: inspectieopening bij alle modellen





Specialities

ARM ADVANCE & TRADITIONAL

Voor hem en haar

COMPRESSIE ARMKOUSSEN worden gebruikt voor zowel de preventie als de behandeling en verzorging van lymfoedeem van de bovenste ledematen en vormen een belangrijk onderdeel in de onderhoudsfase.

ARM SLEEVE ADVANCE		 AG met handje		 CG zonder handje	
Afkorting AAD		Softband*	Siliconen-band	Softband*	Siliconen-band
CCL	14 – 18 mmHg	●	●	●	●
	20 – 25 mmHG	●	●	●	●
Sil band	Sensinova siliconenband		●		●
Kleuren	 licht beige	●	●	●	●

*niet leverbaar in de Plus maten

Huidverzorgend: de polyamide microvezel (Modal) met zilvergebaseerd additief biedt een zachte textuur. Bovendien remt het de groei van bacteriën en voorkomt het geurtjes en huidirritaties

Draagvriendelijk: de thermoregulerende modalvezel neemt bijzonder goed vocht op en is daardoor uiterst aangenaam om te dragen. Modal geeft een zijdezacht gevoel op de huid.

*De modal vezel is een verdere ontwikkeling van viscose, dus een kunstmatige vezel uit natuurlijke grondstoffen, in dit geval cellulose



ARM SLEEVE TRADITIONAL		AC los handje	CH zonder handje met lichaamsgordel	CG zonder handje met siliconenband	AH met handje met lichaamsgordel	AG met handje met siliconenband
Artikel ATR						
CCL	2	●	●	●	●	●
Sil band	Knobbed grip top			●		●



Huidvriendelijk: hoog ademend vermogen dankzij grootmazig geweven breiwerk

Stabiele druk: hoge stiffness dankzij natuurrubber

Slijtvast: tot 6 keer betere* slijtage resultaten (* = minder slijtage) in directe vergelijking met jeans (bewezen in slijtagetests)

Volledig overzicht per compressieniveau en indicaties/behoefte op de voorzijde binnenin de omslag; informatie over speciale modellen/behoefte op blz. 40

ACCESSOIRES

Verzorging en aanvullende producten

De juiste verzorging is essentieel om ervoor te zorgen dat de kousen zo lang mogelijk hun druk en vorm behouden en perfect passen. Verdere aanvullende producten helpen om het dagelijks leven met compressiekousen makkelijker en beter hanteerbaar te maken.

VOOR EEN BETERE GRIP EN DUURZAAMHEID VAN DE SILICONENBOORDEN: CLEAN PAD

Wegwerpreinigingsdoekje met conditionerende bestanddelen voor een betere hechting van de siliconencoating en een langere levensduur van de siliconenboord. Bevat geen alcohol.

1 doos met 10 pads



VOOR HET GEMAKKELIJK WASSEN VAN DE KOUSEN: WAS OPLOSSING SWS

Speciale handwas voor medische compressiekousen en -panty's. De WAS OPLOSSING voldoet aan alle eisen voor een optimaal kousenonderhoud en kan ook voor alle fijne was worden gebruikt. Dagelijks wassen zorgt ervoor dat de compressiekousen na het dragen hun oorspronkelijke vorm en compressie terugkrijgen.

1 enkele fles (250 ml) / 6 flessen à 250 ml



TEGEN HET AFZAKKEN VAN KOUSEN: FIX

Een speciale lijmroller voor het vastzetten van medische compressiekousen op armen en benen zonder grip top, of om extra te fixeren. Het is zacht voor de huid en volgt alle lichaamsbewegingen. Het kan ook worden gebruikt om orthopedische en chirurgische hulpmiddelen enz. op het lichaam te bevestigen. FIX kan met water worden afgewassen en laat geen vlekken na.

1 stuk (60 ml) / 12 stuks à 60 ml



ACCESSOIRES

Aan- en uittrekhelpmiddelen

Veel mensen die voor het eerst steunkousen dragen, vragen zich af hoe zij deze gemakkelijk en zonder veel moeite kunnen aan- en uittrekken. Of het nu voor mobiele dragers is, voor mensen met een beperkte mobiliteit of voor verplegend personeel; wij hebben geschikte oplossingen voor het gemakkelijk aan- en uittrekken van kousen.

VOOR IEDERE KOUSENDRAGER: HANDSCHOENEN EN VOETSLIPS

Handschoenen vergemakkelijken het aan- en uittrekken van de kous en moeten bij elke steunkous worden mee geleverd. Zij helpen de kous te verdelen, te beschermen en zorgen voor een langere levensduur.

Handschoenen van textiel: De latex coating zorgt voor een goede grip en de gebreide stof is bijzonder huidvriendelijk.

Maten:

- XS
- S
- M
- L
- XL



Rubberen handschoenen: De traditionele handschoen gemaakt van rubber voor een perfecte grip

Maten:

- S (size 6,5–7)
- M (size 7,5–8)
- L (size 8,5–9)
- XL (size 9,5–10)



Voet slips: Vergemakkelijkt het aan- en uittrekken van medische compressiekousen met een open teen.



CORRECTE MANIER VAN OPMETEN

Kenmerkend voor medische compressiekousen is onder meer dat de benen moeten worden opgemeten om de maat te bepalen. Dit is om ervoor te zorgen dat de kous past, comfortabel zit en dat de compressie op het been juist is.


Wanneer

Doe de metingen indien mogelijk s' morgens vroeg.
Het been moet vrij zijn van oedeem/zwelling. Meet op de huid.

Hoe

Omtrek: Plaats het meetlint stevig rond het been / heup / taille zonder het te aan te trekken.

Lengte: Meet de lengte aan de binnenkant van het been, met het been recht (met uitzondering van IT).

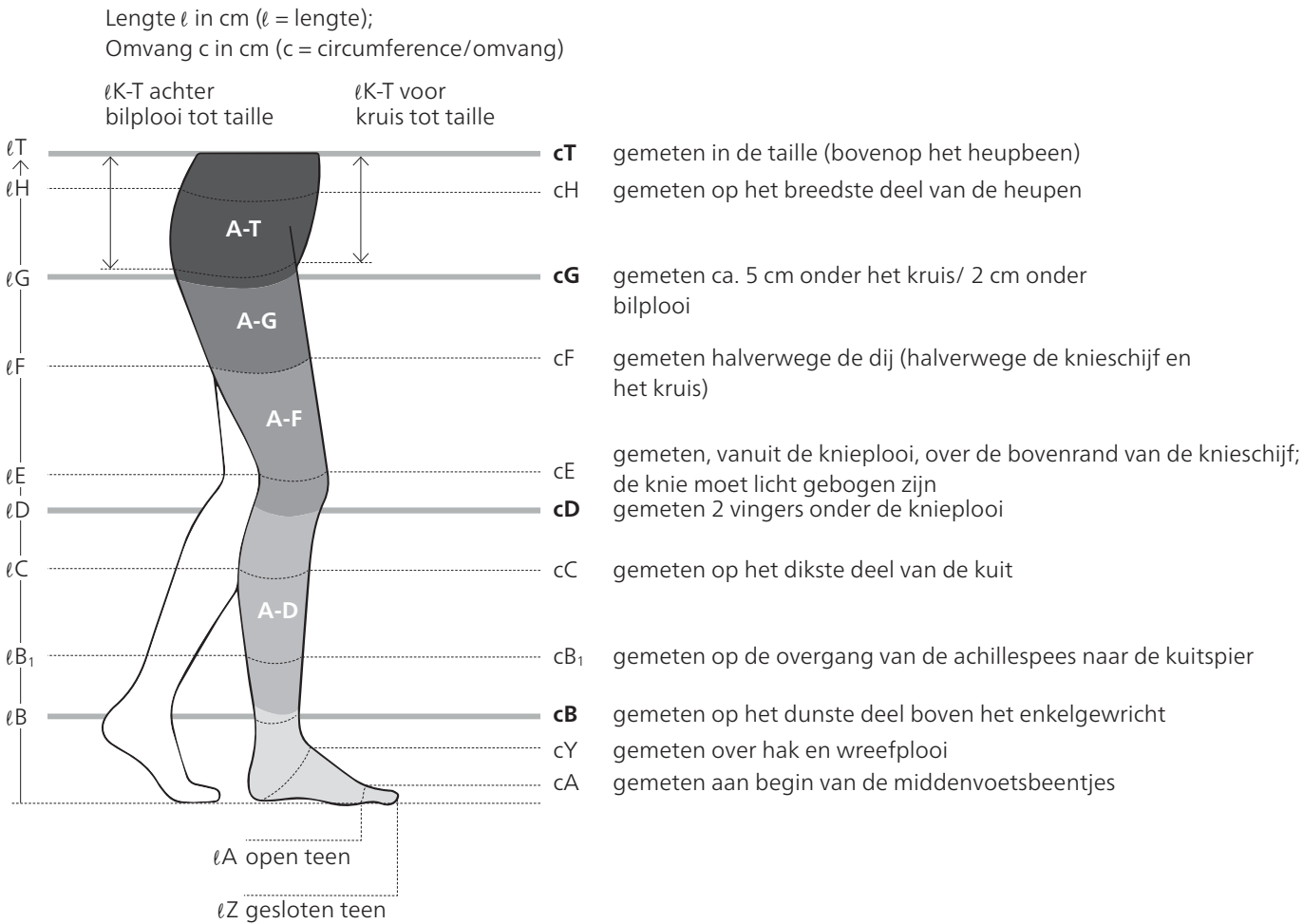

TIPS AND TRICKS

De volgende punten zijn belangrijk bij het adviseren van uw klanten:

Tip 1: De voordelen van compressiekousen uitleggen

Laat de klant precies zien hoe belangrijk, effectief en bovenal comfortabel compressie kan zijn. Alleen op die manier kunnen bestaande vooroordelen worden overwonnen en kan een optimaal therapie succes worden bereikt.

Tip 2: Training aan- en uittrektechnieken

Laat de klant zien hoe hij/zij de compressiekous correct aan- en uittrekt. Laat de klant vervolgens zelf de kous weer aan- en uittrekken, zodat u indien nodig correcties kunt aanbrengen.

Tip 3: Geef instructies over het gebruik en de verzorging

Zodat uw klanten zich volledig op hun gemak voelen met hun compressiekousen, is het belangrijk dat u hen enkele basistips geeft over het gebruik en het onderhoud.



Van vroeg tot laat:

De steunkousen moeten van 's morgens tot 's avonds worden gedragen of zoals voorgeschreven door de arts. De kousen moeten worden aangetrokken na het opstaan voordat de benen beginnen op te zwellen.



Handschoenen helpen:

Onze speciale handschoenen moeten altijd worden gedragen bij het aan- en uittrekken van compressiekousen. Dit maakt het aan- en uittrekken veel gemakkelijker en beschermt de kous.



Aan- en uittrekhulpmiddelen als ondersteuning:
Verdere ondersteuning kan worden geboden door alternatieve aan- en uittrekhulpmiddelen zoals Proflebo Classic, de Arion sim-slide, de Arion magnide on/off, de Sigvaris DOFF N' DONNER, de Handylegs of één van de vele andere slides.



Dagelijks wassen:

De kousen moeten dagelijks met de hand of in de wasmachine worden gewassen met een fijnwas-programma met een maximumtemperatuur van 40 °C en in een wasnetje. Het wasmiddel mag geen wasverzachter bevatten.

BIJZONDERE UITVOERINGEN /SPECIALE EISEN

Omdat elke klant andere eisen stelt, bieden wij naast onze standaard-uitvoeringen, -boorden en -maten ook optimale voorzieningen voor speciale behoeften. Het is belangrijk om individueel op klanten te reageren en het best mogelijke product te vinden. Alleen een product dat goed past en waarin men zich prettig voelt, zal worden gedragen.

SPECIALE BOORDEN

Onze AD-kousen worden standaard geleverd met een softband en onze AG kousen met een siliconenband. Er zijn echter situaties die een andere boord vereisen.

AD met siliconenband

Deze AD-kous biedt een nog betere grip op het been, mocht de AD met softband afzakken. De AD met siliconenband wordt vooral gebruikt als de kuit beperkt ontwikkeld is (d.w.z. als de omvang in het cC- en cD-bereik gelijk is of C kleiner is dan D).

Leverbaar in Style SEMITRSPARENT,
Essentieel COMFORTABEL & THERMOREGULATING en
Specialities TRADITIONEEL.

AG met softband

Deze AG kous met softband wordt gebruikt voor mensen met een gevoelige of geïrriteerde huid.
De speciale lijm FIX kan gebruikt worden om de kousen te fixeren.

Leverbaar in Essential COMFORTABLE &
THERMOREGULATING en Specialities TRADITIONAL.

AG met heupbevestiging

Deze variatie op AG heeft de voorkeur van klanten die geen siliconenband willen of kunnen dragen. Kan ook als links/rechts (als paar) gedragen worden in plaats van een panty. In de taille voorzien van een band met klittebandsluiting.

Leverbaar in Essential COMFORTABLE &
THERMOREGULATING & Specialities TRADITIONAL.

SPECIALE MATEN

Een perfecte pasvorm van de kous is uiterst belangrijk voor de naleving van de voorschriften en de doeltreffendheid van de kousen. Naast onze standaardmaten, die al een breed scala aan maten bestrijken, kunnen wij individuele oplossingen bieden met korte lengtes of speciale kousen voor klanten met grote voeten.

Korte lengte

Deze variant is geschikt voor kleinere personen of personen met een korter onderbeen of beenlengte.

Korte lengte ID Kuit: 31 - 34 cm

Korte lengte IG Panty: 56 - 64 cm

Leverbaar in Essential THERMOREGULATING.

Lange voet

Hier maken we onderscheid tussen volumineuze voeten en voeten met een grote schoenmaat.

- Volumineuze voet:

De Active MASCULINE kous is perfect voor grote voeten in alle maten. De kous is speciaal ontworpen voor de mannelijke voet en kan ook de symptomen verlichten die gepaard gaan met hallux valgus. Geschikt voor grote omvang A en een grote wreefomvang.

- Grote schoenmaat:

Voor het product Essential THERMOREGULATING **maxifoot** bieden wij een medische compressiekous met een verlengd voetgedeelte.

SPECIALE UITVOERINGEN

Naast onze standaardmodellen bieden wij ook diverse andere modellen aan om aan zoveel mogelijk behoeften te voldoen.

AF

Deze korte variant op de dijbeenkous is ideaal voor mensen die spataderen in de knieholte hebben, waardoor een AD-kous ongeschikt is en die geen panty of conventionele AG-kous wensen te dragen.

Leverbaar in Specialties TRADITIONAL

Panty Bodyform

Bij de Bodyform compressiepanty loopt de compressie door tot in het broekdeel. Bij normale compressiepanty's eindigt de compressie op G. De Bodyform-panty is daarom geschikt voor vrouwelijke klanten met zacht bindweefsel en ondersteunt het silhouet van de heupen.

Verkrijgbaar als Essential COMFORTABLE.



TEEN OPTIES

De meeste van onze compressiekousen worden geleverd met een keuze uit twee teenopties. In de meeste gevallen kan de keuze aan de klant worden overgelaten.

Open teen

- Voor klanten die geen gesloten teen nodig hebben.
- Aangenamer om te dragen bij warme temperaturen.
- Gemakkelijker aan te trekken, dus ideaal voor oudere mensen.
- Maakt het mogelijk de kleur van de tenen te observeren.



Gesloten teen

- Om medische redenen, wanneer compressie in het teengebied vereist is, bijv. bij oedeem in voorvoet en tenen.
- Om orthopedische redenen, bij een sterk geprononceerde hallux.

COMPRESSIEWAARDEN, INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES

Het dragen van steunkousen is een effectieve therapie tegen chronische en acute veneuze aandoeningen, ter voorkoming van trombose (bij reizen), spataderen of spataderen tijdens de zwangerschap. Wij adviseren het gebruik van medische steunkousen alleen na overleg met een (gespecialiseerde) arts.

COMPRESSIEWAARDEN IN HET ENKELGEBIED

Compressieklasse 1	18–21 mmHg
Compressieklasse 2	23–32 mmHg
Compressieklasse 3	34–46 mmHg
Compressieklasse 4	>46 mmHg

INDICATIES Compressietherapie wordt over het algemeen door een arts voorgeschreven bij de volgende ziektebeelden :

Chronische veneuze ziekten

- Verlichting van veneuze symptomen
- Verbetering van de levenskwaliteit bij chronische veneuze aandoeningen
- Voorkomen en behandelen van veneus oedeem
- Voorkomen en behandelen van veneuze huid-veranderingen
- Eczeem en hyperpigmentatie
- Lipodermatosclerosis en atrophie blanche
- Behandelen van veneuze ulcera
- Behandeling van gemengde (arteriële en veneuze) beenulcera (rekening houdend met de contra-indicaties)
- Voorkomen recidiverende ulcera
- Pijnvermindering bij veneuze beenulcera
- Varicosis
- Als nabehandeling van spataderen
- Functionele veneuze insufficiëntie (bij zwaarlijvigheid, en zittende en/of staande beroepen)
- Veneuze malformaties

Veneuze trombotische aandoeningen

- Oppervlakkige veneuze trombose
- Diep veneuze trombose
- Veneuze trombose aan de arm
- Post-trombotische aandoeningen
- Post trombotisch syndroom
- Tromboseprofylaxe bij minder mobiele patiënten

Oedeem

- Lymphoedeem
- Zwangerschapsoedeem
- Post-traumatisch oedeem
- Post-operatief oedeem
- Lipoedeem
- Inactiviteitsoedeem/dependency

Overige indicaties

- Obesitas met functionele veneuze insufficiëntie
- Inflammatoire dermatose van de benen
- Orthostatische hypotensie
- Varices bij zwangerschap

CONTRA-INDICATIES

Relatieve contra-indicaties, waarbij voordelen en risico's in het bijzonder tegen elkaar moeten worden afgewogen:

- Ernstige exsuderende dermatose
- Intolerantie voor compressie materiaal
- Ernstige gevoelsstoornissen van de extremiteit
- Gevorderde perifere neuropathie (bv. bij diabetes mellitus)
- Primaire chronische polyarthritis

Absolute contra-indicaties:

- Arteriële insufficiëntie
- Decompensatio cordis
- Phlegmasia cerulea dolens (zeer zeldzaam: volledige afsluiting van de veneuze vaten tgv DVT)

RISICO'S EN BIJWERKINGEN

Onjuist zwachtelen veroorzaakt pijn en kan resulteren in weefselbeschadiging en zelfs necrose en drukschade aan de perifere zenuwen. ACT kan huidnecrose en drukbeschadiging van de perifere zenuwen veroorzaken, vooral bij onoordeelkundige behandeling. Bij een gevoelige huid kunnen onder de compressiehulpmiddelen jeuk, schilfering en tekenen van ontsteking optreden. Daarom is het raadzaam de huid onder de compressiehulpmiddelen adequaat te verzorgen.


¹ Guideline of the German Society of Phlebology on Medical Compression Stockings Phlebology 2019; AWMF (Association of the Scientific Medical Societies) registration:037/005



MAATTABELLEN

Maattabel voor **Essential** COMFORTABLE,
Essential THERMOREGULATING, **Style** SEMITRANSSPARENT,
Active MASCULINE


		Omvang cm											
		XXS	XXS Plus	XS	XS Plus	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
CT		60-75	65-80	65-80	75-90	75-90	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130
CH		75-90	80-95	80-95	85-100	85-100	95-110	95-110	105-120	105-120	115-130	115-130	125-140
CG	zonder sil band	42-54	47-59	47-59	52-64	52-64	56-68	56-68	61-74	61-74	66-79	66-79	73-85
	met sil band	42-52	47-56	47-56	52-61	52-61	56-65	56-65	61-71	61-71	66-76	66-76	73-85
CF		38-49	41-52	41-52	44-55	44-55	49-60	49-60	53-64	53-64	59-70	59-70	63-78
CE		29-36	33-40	33-40	37-44	37-44	39-46	39-46	41-48	41-48	45-52	45-52	46-53
CD		23-30	27-34	27-34	31-38	31-38	34-41	34-41	37-44	37-44	41-48	41-48	42-50
CC		25-32	29-36	29-36	33-40	33-40	35-42	35-42	38-45	38-45	42-49	42-49	43-51
CB ₁		22-26	22-26	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-37	31-37	33-39	33-39
CB		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY		27-31	27-31	28-33	28-33	29-35	29-35	31-37	31-37	32-38	32-38	33-39	33-39
CA		18-20	18-20	20-22	20-22	22-24	22-24	24-26	24-26	26-29	26-29	29-32	29-32

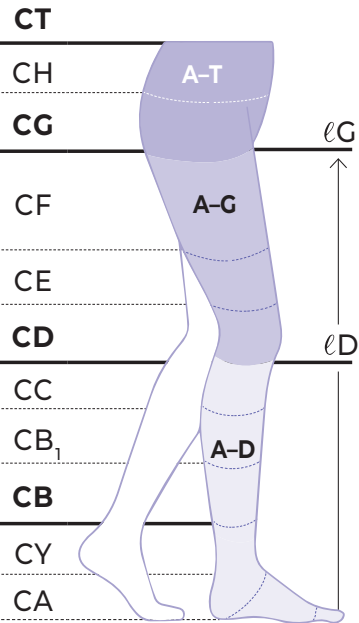

Lengte cm					
short*	31 – 34	short	56 – 64	short**	56 – 64
normal	35 – 40	normal	65 – 74	normal	65 – 74
long	41 – 45	long	75 – 84	long	75 – 84

AD = onderbeen; AG = Dijbeen; AT = Panty; AT Maternity =voor zwangere vrouwen of vrouwen met voller postuur: de omtrekmetingen cH en cT worden vervangen door een speciaal buikgedeelte/positiebroek

Maattabellen voor **Specialities** ARM KOUSEN

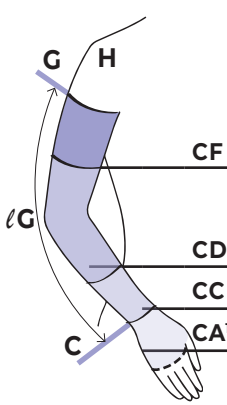

ADVANCE Omvang cm										
	XS	XS Plus ²	S	S Plus ²	M	M Plus ²	L	L Plus ²	XL	XL Plus ²
CF	24-32	32-38	26-34	34-40	29-37	37-43	32-40	40-46	34-42	42-48
CD										
CC	13-14	13-14	14-16	14-16	16-18	16-18	18-20	18-20	20-23	20-23
CA ¹	16-20	16-20	17-21	17-21	18-22	18-22	19-23	19-23	20-24	20-24

TRADITIONAL Omvang cm		
S	M	L
24-30	30-36	36-42
20-24	24-28	28-32
13-16	16-19	19-22
16-19	18-22	22-25

¹ alleen voor handschoenn (A-C)

² Plusmaat alleen mogelijk voor ADVANCE AG en CG in combinatie met siliconenband

ADVANCE Lengte cm			
normal	<43		
long	>43		
AG	AG	CG	CG
met handje met softband	met handje met Sensinova sil band	met softband	met Sensinova sil band

TRADITIONAL Lengte cm				
	normal	40 – 46		
	long	46 – 52		
AC	CH	CG	AH	AG
losse handschoen	met lichaamsgordel (arm)	met sil band	met handje met lichaamsgordel (arm)	met handje met sil band

Verkrijgbare maten voor **Specialities** TRADITIONAL, **Specialities** ULCER X

	Drukklasse	Maten									Lengte		
		XS	S	S PLUS	M	M PLUS	L	L PLUS	XL	XL PLUS	short	long	
 AB₁ Enkelsok			●		●		●						
 AD	CCL 2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CCL 3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CCL 4		● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹			●	●	
 AF Halfhoog	CCL 2	● ¹	●	●	●	●	●	●	● ¹	● ¹	●	●	
	CCL 3		●	●	●	●	●	●			●	●	
	CCL 4			● ¹		● ¹		● ¹			●	●	
 AG Dijbeen	CCL 2	● ^{1,2}	●	●	●	●	●	●	● ^{1,2}	● ^{1,2}	●	●	
	CCL 3		●	●	●	●	●	●			●	●	
	CCL 4			● ¹		● ¹		● ¹				●	
 AG Met heupstuk	CCL 2		●	●	●	●	●	●			●	●	
	CCL 3			●		●		●			●	●	
 AT Panty AT Maternity	CCL 2			●		●		●			●	●	
 AT voor man	CCL 2			●		●		●			●	●	
ULCER X Kit	~45mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	


¹ uitvoering alleen leverbaar zonder siliconenband

² uitvoering alleen leverbaar in long

MAATTABEL

Omvangs- en lengtematentabel voor de **Specialities** TRADITIONAL,
Specialities ULCER X

	Omvang cm								
	XS	S	S Plus	M	M Plus	L	L Plus	XL	XL Plus
CT		tot 80	tot 80	tot 90	tot 90	tot 100	tot 100		
CH		tot 110	tot 110	tot 120	tot 120	tot 130	tot 130		
CG	40-50	42-52	50-60	50-60	58-68	58-68	66-76	61-71	69-79
CF	39-48	41-50	45-54	48-57	53-62	55-64	61-70	58-67	64-73
CE	29-34	32-37	36-41	35-40	40-45	38-43	44-49	41-46	48-53
CD	26-32	28-34	32-38	31-37	36-42	34-40	40-46	38-43	44-49
CC	28-31	31-36	35-40	34-39	39-44	37-42	43-48	40-45	47-52
CB ₁	21-24	24-29	24-29	29-32	29-32	32-36	32-36	35-39	35-39
CB	17-19	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-32	29-32
CY	25-28	28-32	28-32	32-35	32-35	35-38	35-38	38-41	38-41
CA	17-19	19-23	19-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-32	29-32

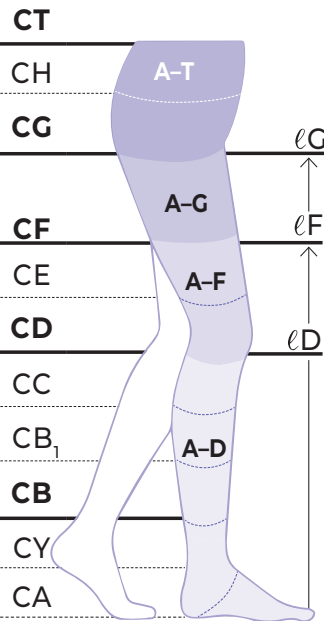

Lengte cm							
short	33 – 37	short	56 – 60	short	61 – 70	short	61 – 70
long	38 – 44	long	61 – 70	long	71 – 80	long	71 – 80


AB₁ = Enkelsok; **AD** = kniekous; **AF** = Halfhoog; **AG** = Dijbeen; **AT**= Panty; **AT Maternity** = **AT Maternity** =voor zwangere vrouwen of vrouwen met voller postuur: de omtrekmetingen cH en cT worden vervangen door een speciaal buikgedeelte/positiebroek

MAATTABEL

Omvangs- en lengtematentabel voor de **Specialities** DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN

Omvang cm				
	S	M	L	XL*
CD	27-33	31-39	35-45	41-51
CB	18-22	22-26	26-29	29-36

*maat XL alleen in leverbaar in **men**

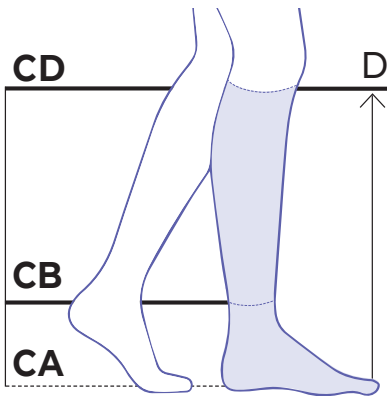


Lengte cm	
short	≤ 41
long	> 41



Schoenmaat (richtlijnen)			
		short	long
Euro	vrouw	tot 39	tot 42
	man	tot 43	tot 46
UK	vrouw	tot 6	tot 8
	man	tot 9	tot 11
US	vrouw	tot 8.5	tot 10.5
	man	tot 10	tot 12
AUS/NZL	vrouw	tot 7	tot 8.5
	man	tot 8.5	tot 11.5

De twee varianten DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN **women** en DIABETISCHE COMPRESSIE SOKKEN **men** verschillen in de omvang van het voetgedeelte.

Omvangs- en lengtematentabel voor de **Specialities** THROMBO

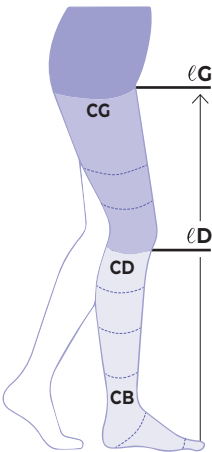

THROMBO Omvang (cm)	CB	CD	CG
x-small ²	17–19 cm	≤ 34 cm	≤ 52 cm
small	19–23 cm	≤ 38 cm	≤ 60 cm
medium	23–26 cm	≤ 42 cm	≤ 68 cm
large	26–29 cm	≤ 46 cm	≤ 76 cm

THROMBO Lengte (cm)	lD	lG
short	≤ 37 cm	≤ 70 cm
long	≥ 38 cm	≥ 71 cm

VOLLEDIG PRODUCT OVERZICHT IN VOLGORDE VAN COMPRESSIE

Product		Model	Afwerking	CCL				Teen		Sil band			Pag
				1	2	3	4			LGT*	SVGT*	KGT*	
sigvaris													
Essential	COMFORTABLE	AD	Softband	1	2			•	•				13
			Siliconenband		2			•	•			•	
		AG	Softband	1	2			•	•				
			Siliconenband	1	2			•	•		•	•	
			Heupstuk		2			•	•				
		AT	Softband	1	2			•	•				
		AT Maternity	Softband	1	2			•	•				
		AT Bodyform	Softband		2			•	•				
	THERMOREGULA- TING	AD	Softband	1	2	3		•	•				15
			Siliconenband		2			•	•			•	
		AG	Soft top	1	2			•	•				
			Siliconenband	1	2	3		•	•		• CCL 1 / 2	•	
			Heupstuk	1	2	3		•	•				
		AT	Softband	1	2	3		•	•				
		AT Maternity	Softband	1	2			•	•				
								•	•				
								•	•				
Style	SEMITRANSPARENT	AD	Softband	1	2			•	•				21
			Siliconenband		2			•	•			•	
		AG	Siliconenband	1	2			•	•		•	•	
		AT	Softband	1	2			•	•				
		AT Maternity	Softband	1	2			•	•				
Active Specialities	MASCULINE	AD	Softband		2				•				25
	TRADITIONAL	AB ₁	Enkelsok		–			•					29
AD		Softband		2	3	4	•						
		Siliconenband		2	3		•				•		
AF		Softband		2	3	4	•						
		Siliconenband		2	3		•				•		
AG		Softband		2	3	4	•						
		Siliconenband		2	3		•				•		
		Heupstuk		2	3		•						
AG Post OP		Heupstuk		2	3		•						
AT		Softband		2			•						
AT Maternity		Softband		2			•						
AT man		Softband		2			•						
ULCER X	AD	Softband		~45 mmHg			Liner gesloten teen, TRADITIONAL open					31	
DIABETISCHE COMPRESSIE SOK	AD	Softband		18–25 mmHg				•				33	
ARM SLEEVE ADVANCE	AG met handje	Softband		14–18 mmHg								37	
		Siliconenband								•			
	CG zonder handje	Softband		20–25 mmHg									
		Siliconenband								•			
ARM SLEEVE TRADITIONAL	AC handschoen	–		2									
	CH zonder handje	Lichaamsband		2									
	CG zonder handje	Siliconenband		2							•		
	AH met handje	Lichaamsband		2									
	AG met handje	Siliconenband		2							•		

*LGT = Lace siliconenband; SVGT = Sensinova siliconenband; KGT = Quadrinova noppen siliconenband (Essential COMFORTABLE, Essential THERMOREGULATING, Style SEMITRANSSPARENT) / Noppen siliconenband (Essential CLASSICAL / Specialities TRADITIONAL, and Arm Sleeve TRADITIONAL,)



WE ARE DEDICATED TO HELPING PEOPLE

Nederland

Proflebo BV
Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen
Tel: +31 575 725 999
info@proflebo.nl
www.proflebo.nl

Export

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
Switzerland
Phone: +41 71 272 40 00
Fax: +41 71 272 40 01
www.sigvaris.group

