

SIGVARIS

VLAKBREI ASSORTIMENT



SIGVARIS MEDICAL

Optiform Flex										
model / CCL										
CCL1										
CCL2										

Optiform Hold										
model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Optiform Hold en Optiform Flex

Deze twee productlijnen doen hun naam eer aan. Ze bieden optimale ondersteuning en comfort tegelijkertijd. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze unieke fabricagetechnologie, waardoor we in staat zijn pantybroeken te maken zonder extra naden.

De Optiform Hold is leverbaar in beige en zwart en in de drukklassen I-IV. De Optiform Hold, met zijn ready-to-wear-technologie, is ontworpen voor patiënten die lijden aan lipoedeem, chronisch oedeem tot en met stadium III lymfoedeem die willen ervaren dat comfort, tijdens het dragen van hun voorziening, niet ten koste gaat van de optimale compressieve werking ervan.

De Optiform Flex is leverbaar in de drukklassen I en II en eveneens in beige en zwart. De Optiform Flex is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Door de intelligente samenstelling van de garenmix is het materiaal veel beter in staat om vocht op te nemen en te af te voeren dan puur katoen, dankzij een groot aandeel aan *modal en viscose. Dit geeft een comfortabel en verfrissend gevoel tijdens het dragen. Deze compressie producten zijn uitermate geschikt voor diegenen die leiden aan lipoedeem en of lymfoedeem, stadium I en II en die de voorkeur geven aan het gebruik van natuurlijke materialen.

*Modal is textiel gemaakt uit modalvezels. De modalvezel is een verdere ontwikkeling van viscose, dus een kunstmatige vezel uit natuurlijke grondstoffen in dit geval cellulose. Het doel was om met deze nieuwe vezel de eigenschappen van katoen zo veel mogelijk te benaderen. Ook wel kunstmatig zijde genoemd.

AD KNIEKOUS



AG BOVENBEENKOUS



BG BOVENBEENKOUS



AT PANTY



BT LEGGING



AT MONOPANTY



CAPRI



ET BERMUDA



FT FIETSBROEK



Assortimentsoverzicht

model AB1 enkelsok

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model AB1 enkelsok

		Opties	Omschrijving	
Voet	Open teen	Recht	Open teen, recht afgewerkt	
		Schuin	Open teen, schuin afgewerkt	
	Gesloten teen standaard	Recht	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk	
		Schuin	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk, A schuin	
	Gesloten teen soft teenstuk	Recht	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde	
		Schuin	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde, A schuin	



Alle opties voor model

AB1 enkelsok

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Hiel	Standaard		Standaard	
	Anatomisch/ maatwerk		Als standaard maar met verhoogde pasvorm door 4 extra op te geven maten	Wreef met specifiek anatomisch verloop. Om de pasvorm te optimaliseren
	Y markering		Geoptimaliseerde pasvorm door een 90° hiel	Geeft minder plooien op de wreef
Afwerking boord B1	Recht		Standaard	
Opties afwerking boord	Optiline		Standaard hoogwaardige afwerking	
	Siliconenband	3.5 cm	3.5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	
		5.0 cm	5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	
Overige	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voering		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Bij gevoelige, beschadigde huid
	Ingenaaide pelotte	Links en rechts mediaal en lateraal mogelijk	Siliconenpelotte in een voering gestikt	Voor lokale drukverhoging

Assortimentsoverzicht

model AD onderbeen

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model

AD

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Voet	Open teen	Recht	Open teen, recht afgewerkt
		Schuin	Open teen, schuin afgewerkt
	Gesloten teen standaard	Recht	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk
		Schuin	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk, A schuin
	Gesloten teen soft teenstuk	Recht	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde
		Schuin	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde, A schuin



Alle opties voor model AD onderbeenkous

	Optie	Omschrijving	Toepassing	
Hiel	Standaard	Standaardoptie		
	Anatomisch	Als standaard maar met verhoogde pasvorm door 4 extra op te geven maten	Wreef met specifiek anatomisch verloop. Om de pasvorm te optimaliseren	
	Y markering	Geoptimaliseerde pasvorm door een 90° hiel	Geeft minder plooien op de wreef	
Afwerking boord	Recht	Standaardoptie		
	Laterale verhoging	Buitenzijde been langer dan binnenzijde	Voorkomt circulair insnoeren	
	Maximale laterale verhoging	Buitenzijde been langer dan binnenzijde	Voorkomt circulair insnoeren (bij grote cD)	
Opties afwerking boord	Optiline	Standaard hoogwaardige afwerking		
	Siliconenband	3.5 cm	3.5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	
		5.0 cm	5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	
Overige	Ritssluiting	Binnen, buiten, achter	Ritssluiting in de kous	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)		Net als een BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt afknelling van oedeem, weefsel of huid
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm	Ingenaaid stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Voor de gevoelige, beschadigde huid
	Ingenaaide pelotte	Links en rechts mediaal en lateraal mogelijk	Siliconenpelotte in voering gestikt	Voor lokale drukverhoging

Assortimentsoverzicht

model AG bovenbeenkous

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model

AG

	Opties	Omschrijving	
Voet	Open teen	Recht	Open teen, recht afgewerkt
		Schuin	Open teen, schuin afgewerkt
	Gesloten teen standaard	Recht	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk
		Schuin	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk, A schuin
	Gesloten teen soft teenstuk	Recht	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde
		Schuin	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde, A schuin

Alle opties voor model
AG bovenbeenkous

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Hiel	Standaard		Standaardoptie	
	Anatomisch		Als standaard maar met verhoogde pasvorm door 4 extra op te geven maten	Wreef met specifiek anatomisch verloop. Om de pasvorm te optimaliseren
	Y markering		Geoptimaliseerde pasvorm door een 90° hiel	Geeft minder rimpels op de wreef
Afwerking boord	Recht		Standaardoptie	
	Laterale verhoging		Buitenzijde been langer dan binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering. Optimale drukverdeling tot in de lies
	Maximale laterale verhoging		Buitenzijde been langer dan binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering. Optimale drukverdeling tot in de lies. Bij grotere omvangsmaten
	Verhoging aan de voorzijde		Voorzijde been langer dan de achterzijde	Voorkomt circulaire insnoering. Optimale drukverdeling tot in de lies. Voor grotere dijspreidingen en voor sterke plaatselijke weefselophoping aan de voorzijde van het bovenbeen
Opties afwerking boord	Optiline		Standaard hoogwaardige afwerking	
	Siliconenboord	3.5 cm	3.5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	
		5.0 cm	5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	
	Heupbevestigings- rechts/links	Elastisch band met sluiting	Heupstuk doorgebreid op de AG-kous, naadloos	
		Tailleband met sluiting	Heupstuk doorgebreid op de AG-kous, naadloos	



Alle opties voor model

AG

	Opties	Omschrijving	Toepassing	
overige	Kniefunctiezone**	Losmazig geweven patroon aan voor- en achterzijde van de knie	Voorkomt insnoeren en rimpels	
	Ritssluiting in beendeel	Binnen, buiten, achter	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)		Net als BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij het sluiten van de rits
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm	Ingenaaid stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Voor de gevoelige, beschadigde huid
	Ingenaaide pelotte	Links en rechts mediaal en lateraal mogelijk	Siliconenpelotte in voering gestikt	Voor lokale drukverhoging



Assortimentsoverzicht

model beendeel, zonder voet (BD, B₁D, BG, B₁G, EG)

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										

Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model beendeel (BD, B₁D, BG, B₁G, EG)

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Afwerking G	Recht	Standaardoptie	
	Laterale verhoging	Buitenzijde been langer dan binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering. Optimale drukverdeling tot in de lies.
	Maximale laterale verhoging	Buitenzijde been langer dan binnenzijde	Voorkomt circulaire insnoering. Optimale drukverdeling tot in de lies. Bij grotere omvangsmaten
	Verhoging aan de voorzijde*	Voorzijde been langer dan de achterzijde	Voorkomt circulaire insnoering. Optimale drukverdeling tot in de lies. Voor grotere dijomtrekken en voor sterke plaatselijke weefselophoping aan de voorzijde van het bovenbeen.

* Verhoging aan de voorzijde alleen mogelijk wanneer de kous op G eindigt

Alle opties voor model
beendeel (BD, B1D, BG, B1G, EG)

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Afwerking boord	Optiline	Standaardoptie	
	Siliconenboord	3.5 cm 3.5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	
		5.0 cm 5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	
Overige	Kniefunctiezone**	Losmazig geweven patroon aan voor- en achterzijde van de knie	Voorkomt insnoeren en rimpels
	Ritssluiting in beendeel	Binnen, buiten, achter ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)	Net als BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij het sluiten van de rits
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm Ingenaaid stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte	Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof	Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Bij de gevoelige, beschadigde huid.

** De kniefunctiezone is alleen mogelijk met de modellen BG, B1G, CG



Assortimentsoverzicht

model AT panty

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model AT panty

		Opties	Omschrijving	
Voet	Open teen	Recht	Open teen, recht afgewerkt	
		Schuin	Open teen, schuin afgewerkt	
	Gesloten teen standaard	Recht	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk	
		Schuin	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk, A schuin	
	Gesloten teen soft teenstuk	Recht	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde	
		Schuin	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde, A schuin	

Alle opties voor model
AT panty

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Hiel	Standaard	Standaardoptie	
	Anatomisch	Als standaard maar met verhoogde pasvorm door 4 extra op te geven maten	Wreef met specifiek anatomisch verloop. Om de pasvorm te optimaliseren
	Y markering	Geoptimaliseerde pasvorm door een 90° hiel	Geeft minder rimpels op de wreef
Opties afwerking taille	Softline	Standaardoptie	Verhoogd comfort door soepele overgang
	Siliconenboord	5.0 cm 5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	Afzakken wordt voorkomen door grip op de huid
	Tailleband	Tailleband zoals bij heupstuk	Aangenaam om te dragen, behoudt zijn vorm /krult minder snel om
	Elastisch band	Elastisch band zonder siliconen	Contour volgend, tekent minder af onder kleding
	Knoopsgat elastiek	Gebreide afwerking /tunnel met knoopsgat elastiek	Verstelbaar in omvang



Alle opties voor model
AT panty

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Lichaamsdeel	Broek ccl 0	Broek voorzijde zonder compressie	Broek voorzijde gebreid zonder compressief garen	Zwangerschap
	Kruisstuk dames	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruisstuk heren	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruis met horizontale gulp		Horizontale gulp in voorzijde broek	Alternatieve toepassing voor toiletgang

Alle opties voor model
AT panty

	Opties	Omschrijving	Toepassing	
Overige	Kniefunctiezone		Losmazig geweven patroon aan voor- en achterzijde van de knie	Voorkomt insnoeren en rimpels
	Ritssluiting in beendeel	Binnen, buiten, achter	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Ritssluiting in lichaamsdeel/broek	1 stuks, midden, linkerzijde, of rechterzijde	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit en extreme afwijkingen van C- en H-omtrekken. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)		Net als BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij het sluiten van de rits
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm	Ingenaaid stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Bij de gevoelige, beschadigde huid
	Ingenaaide pelotte	Links en rechts mediaal en lateraal mogelijk	Siliconenpelotte in voering gestikt	Voor lokale drukverhoging



Assortimentsoverzicht

model BT legging

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model BT legging

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Opties afwerking taille	Softline	Standaardoptie	Verhoogd comfort door soepele overgang
	Siliconenboord	5.0 cm 5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	Afzakken wordt voorkomen door grip op de huid
	Tailleband	Tailleband zoals bij heupstuk	Aangenaam om te dragen, behoudt zijn vorm /krult minder snel om
	Elastisch band	Elastisch band zonder siliconen	Contour volgend, tekent minder af onder kleding
	Knoopsgat elastiek	Gebreide afwerking /tunnel met knoopsgat elastiek	Verstelbaar in omvang

Alle opties voor model BT legging

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Lichaamsdeel	Broek ccl 0	Broek voorzijde zonder compressie	Broek voorzijde gebreid zonder compressief garen	Zwangerschap
		Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
	Kruisstuk dames	Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
		Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
	Kruisstuk heren	Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruis met horizontale gulp		Horizontale gulp in voorzijde broek	Alternatieve toepassing voor toiletgang
Overige	Kniefunctiezone		Losmazig geweven patroon aan voor- en achterzijde van de knie	Voorkomt insnoeren en rimpels
	Ritssluiting in beendeel	Binnen, buiten, achter	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Ritssluiting in lichaamsdeel/broek	1 stuks, midden, linkerzijde, of rechterzijde	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit en extreme afwijkingen van C- en H-omtrekken. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)		Net als BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij het sluiten van de rits
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm	Ingenaaide stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Bij de gevoelige, beschadigde huid



Assortimentsoverzicht

model AT monopanty

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										

Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model AT monopanty

	Opties	Omschrijving	
Voet	Open teen	Recht	Open teen, recht afgewerkt
		Schuin	Open teen, schuin afgewerkt
	Gesloten teen standaard	Recht	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk
		Schuin	Standaard gesloten teen, met de naad aan de binnenzijde van het teenstuk, A schuin
	Gesloten teen soft teenstuk	Recht	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde
		Schuin	Teenstuk en naad van zacht materiaal, naad aan buitenzijde, A schuin

Alle opties voor model
AT monopanty

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Hiel	Standaard	Standaardoptie	
	Anatomisch	Als standaard maar met verhoogde pasvorm door 4 extra op te geven maten	Wreef met specifiek anatomisch verloop. Om de pasvorm te optimaliseren
	Y markering	Geoptimaliseerde pasvorm door een 90° hiel	Geeft minder rimpels op de wreef
Opties afwerking taille	Softline	Standaardoptie	Verhoogd comfort door soepele overgang
	Siliconenboord	5.0 cm 5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	Afzakken wordt voorkomen door grip op de huid
	Tailleband	Tailleband zoals bij heupstuk	Aangenaam om te dragen, behoudt zijn vorm /krult minder snel om
	Elastisch band	Elastisch band zonder siliconen	Contour volgend, tekent minder af onder kleding
	Knoopsgat elastiek	Gebreide afwerking /tunnel met knoopsgat elastiek	Verstelbaar in omvang



Alle opties voor model
AT monopanty

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Lichaamsdeel	Broek ccl 0	Broek voorzijde zonder compressie	Broek voorzijde gebreid zonder compressief garen	Zwangerschap
	Kruisstuk dames	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruisstuk heren	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruis met horizontale gulp		Horizontale gulp in voorzijde broek	Alternatieve toepassing voor toiletgang

Alle opties voor model
AT monopanty

Overige	Opties		Omschrijving	Toepassing
	Kniefunctiezone		Losmazig geweven patroon aan voor- en achterzijde van de knie	Voorkomt insnoeren en rimpels
	Ritssluiting in beendeel	Binnen, buiten, achter	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Ritssluiting in lichaamsdeel/broek	1 Stuks, midden, linkerzijde, of rechterzijde	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit en extreme afwijkingen van C- en H-omtrekken. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)		Net als BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij het sluiten van de rits
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm	Ingenaaid stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Voor de gevoelige, beschadigde huid
Ingenaaide pelotte	Links en rechts mediaal en lateraal mogelijk	Siliconenpelotte in voering gestikt	Voor lokale drukverhoging	



Assortimentsoverzicht

model capri

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										

Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model capri

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Opties afwerking taille	Softline	Standaardoptie	Verhoogd comfort door soepele overgang
	Siliconenboord	5.0 cm 5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	Afzakken wordt voorkomen door grip op de huid
	Tailleband	Tailleband zoals bij heupstuk	Aangenaam om te dragen, behoudt zijn vorm /krult minder snel om
	Elastisch band	Elastisch band zonder siliconen	Contour volgend, tekent minder af onder kleding
	Knoopsgat elastiek	Gebreide afwerking /tunnel met knoopsgat elastiek	Verstelbaar in omvang

Alle opties voor model capri

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Lichaamsdeel	Broek ccl 0	Broek voorzijde zonder compressie	Broek voorzijde gebreid zonder compressief garen	Zwangerschap
	Kruisstuk dames	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruisstuk heren	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruis met horizontale gulp		Horizontale gulp in voorzijde broek	Alternatieve toepassing voor toiletgang
Overige	Kniefunctiezone		Losmazig geweven patroon aan voor- en achterzijde van de knie	Voorkomt insnoeren en rimpels
	Ritssluiting in beendeel	Binnen, buiten, achter	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Ritssluiting in lichaamsdeel/broek	1 stuks, midden, linkerzijde, of rechterzijde	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit en extreme afwijkingen van C- en H-omtrekken. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)		Net als BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij het sluiten van de rits
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm	Ingenaaide stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Bij de gevoelige, beschadigde huid



Assortimentsoverzicht

model ET bermuda

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										

Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model ET bermuda

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Opties afwerking taille	Softline	Standaardoptie	Verhoogd comfort door soepele overgang
	Siliconenboord	5.0 cm 5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	Afzakken wordt voorkomen door grip op de huid
	Tailleband	Tailleband zoals bij heupstuk	Aangenaam om te dragen, behoudt zijn vorm /krult minder snel om
	Elastisch band	Elastisch band zonder siliconen	Contour volgend, tekent minder af onder kleding
	Knoopsgat elastiek	Gebreide afwerking /tunnel met knoopsgat elastiek	Verstelbaar in omvang

Alle opties voor model
ET bermuda

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Lichaamsdeel	Broek ccl 0	Broek voorzijde zonder compressie	Broek voorzijde gebreid zonder compressief garen	Zwangerschap
	Kruisstuk dames	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruisstuk heren	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruis met horizontale gulp		Horizontale gulp in voorzijde broek	Alternatieve toepassing voor toiletgang
Overige	Ritssluiting in beendeel	Binnen, buiten, achter	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Ritssluiting in lichaamsdeel/broek	1 stuks, midden, linkerzijde, of rechterzijde	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit en extreme afwijkingen van C- en H-omtrekken. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)		Net als BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij het sluiten van de rits
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm	Ingenaaide stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Bij de gevoelige, beschadigde huid



Assortimentsoverzicht

model FT fietsbroek

Optiform Flex										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
Optiform Hold										
Model / CCL										
CCL1										
CCL2										
CCL3										
CCL4										

Alle opties voor model FT fietsbroek

	Opties	Omschrijving	Toepassing
Opties afwerking taille	Softline	Standaardoptie	Verhoogd comfort door soepele overgang
	Siliconenboord	5.0 cm 5 cm brede siliconenboord om afzakken tegen te gaan	Afzakken wordt voorkomen door grip op de huid
	Tailleband	Tailleband zoals bij heupstuk	Aangenaam om te dragen, behoudt zijn vorm /krult minder snel om
	Elastisch band	Elastisch band zonder siliconen	Contour volgend, tekent minder af onder kleding
	Knoopsgat elastiek	Gebreide afwerking /tunnel met knoopsgat elastiek	Verstelbaar in omvang

Alle opties voor model
FT fietsbroek

		Opties	Omschrijving	Toepassing
Lichaamsdeel	Broek ccl 0	Broek voorzijde zonder compressie	Broek voorzijde gebreid zonder compressief garen	Zwangerschap
	Kruisstuk dames	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruisstuk heren	Standaard	Standaardoptie	Standaardoptie
		Versterkt	Versterkt kruisdeel	Bij genitaal oedeem
		Open	Open kruis	Ademend, luchtcirculatie
	Kruis met horizontale gulp		Horizontale gulp in voorzijde broek	Alternatieve toepassing voor toiletgang
Overige	Ritssluiting in beendeel	Binnen, buiten, achter	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Ritssluiting in lichaamsdeel/broek	1 stuks, midden, linkerzijde, of rechterzijde	Ingenaaide ritssluiting	Bij beperkte mobiliteit en extreme afwijkingen van C- en H-omtrekken. Kan het aan- en uittrekken vergemakkelijken
	Haak&oogsluiting (optioneel bij een ritssluiting)		Net als BH-sluiting	Gemakkelijker sluiten van de rits. Voorkomt dat de huid tussen de rits komt bij het sluiten van de rits
	Siliconenstukje	3.5 cm 5.0 cm	Ingenaaide stuk siliconenband voor waar extra fixatie nodig is	Toepassing bij zacht weefsel op het bovenbeen, om afzakken tegen te gaan
	Pocket voor pelotte		Ingenaaide pocket met opening	Pocket waar desgewenst een pelotte/ polstermateriaal in geplaatst kan worden
	Voeringstof		Ingenaaide voering welke de wrijving vermindert tussen de kous en de huid	Bijzonder zacht voor de huid. Bij de gevoelige, beschadigde huid



Vlakbrei

extra opties

Verstevigde naad

Leverbaar bij
Optiform Flex
Optiform Hold



		Opties	Omschrijving		
Optie naad	Verstevigde naad	zonder design	Zachte gebreide bies als versteviging op de achternaad, verkrijgbaar in beige en zwart		
		design: kleur zwart	Zachte gebreide bies als versteviging op de achternaad met XXXmotief voor zwart		
		design: kleur beige	Zachte gebreide bies als versteviging op de achternaad met ===motief voor beige		
		persoonlijk	Zachte gebreide bies als versteviging op de achternaad, maximaal 40 tekens in hoofdletters, voor zwart en beige		

Hallux valguszone en verlengde voetzool


Leverbaar bij
Optiform Flex
Optiform Hold



		Opties	Omschrijving		
Optie	Hallux valguszone		Losmazig geweven breiwerk om de hallux valgus te ontlasten		
	Verlengde voetzool		Verlenging van de zool, alleen bij open teen met schuine afwerking		

Optie poreuze boord

Leverbaar bij
Optiform Flex
Optiform Hold

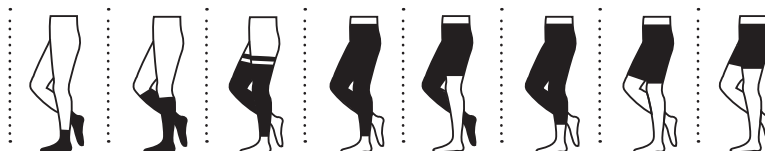

		Optie	Omschrijving		
Afwerking boord	Poreuze boord*	Standaard (3 cm)	Verminderde druk in afwerking van de boord door losmazig breiwerk. Mogelijk aan de bovenzijde en/of onderzijde van het beendeel		
		Variabel (3-8 cm)			

*alleen mogelijk bij een rechte afwerking van het been

.....

Afbeeldingen diverse vlakbrei opties



Elastisch band



Knoopsgatelastiek



Optiline



Tailleband



Broek standaard doorgebreed



Herenpanty



Knieflexzone achterzijde



Knieflexzone voorzijde



Verlengde voetzool



Hallux valguszone



Poreuze rand 5 cm



Standaard naad



Designnaad bij zwart



Designnaad bij huidskleur



[illegible]

[illegible]

SIGVARIS

Nederland

Proflebo BV
Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen
Tel: +31 575 725 999
info@proflebo.nl
www.proflebo.nl

Export

SIGVARIS AG
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
Switzerland
Phone: +41 71 272 40 00
Fax: +41 71 272 40 01
www.sigvaris.group

